


ragmask.com

Não precisa de outras páginas, guarde o seu papel.




Verifique se esta imprimido no tamanho correto.

Uma regra real deveria corresponder a regra mostrada abaixo.

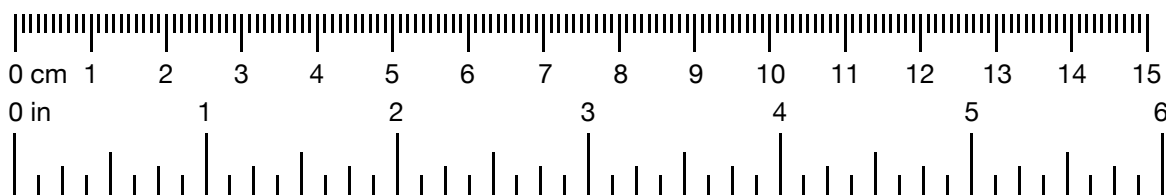

3. Corte as materiais.

11"x11" (28x28cm) de pano, **1** pedaço por mascara
1"x16" (2.5x40cm) de pano para as fitas, **4** pedaços por mascara


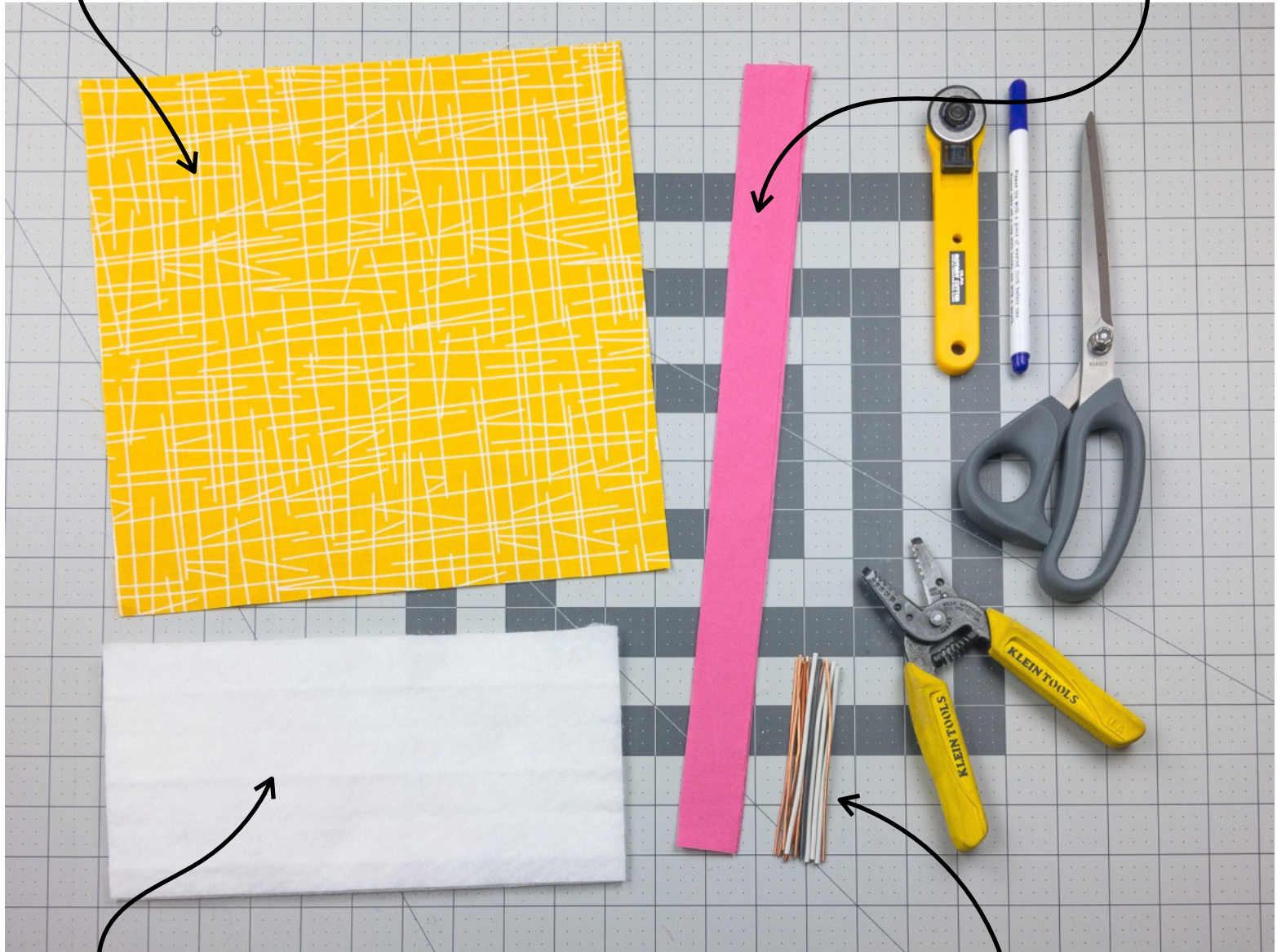


10"x5" (26x13cm) filtro (opcional)*, **1** pedaço por mascara
4" (10cm) fio de metal, **1** pedaço por mascara, 14ga fio de cobre funciona bem

* A efetividade de diferentes materiais de filtro será comunicado.

* Visite ragmask.com/materials para a informação mais atualizada.
Even no filter (just fabric) can be more effective than no mask at all.

4. Dobre o pano encima do filtro.

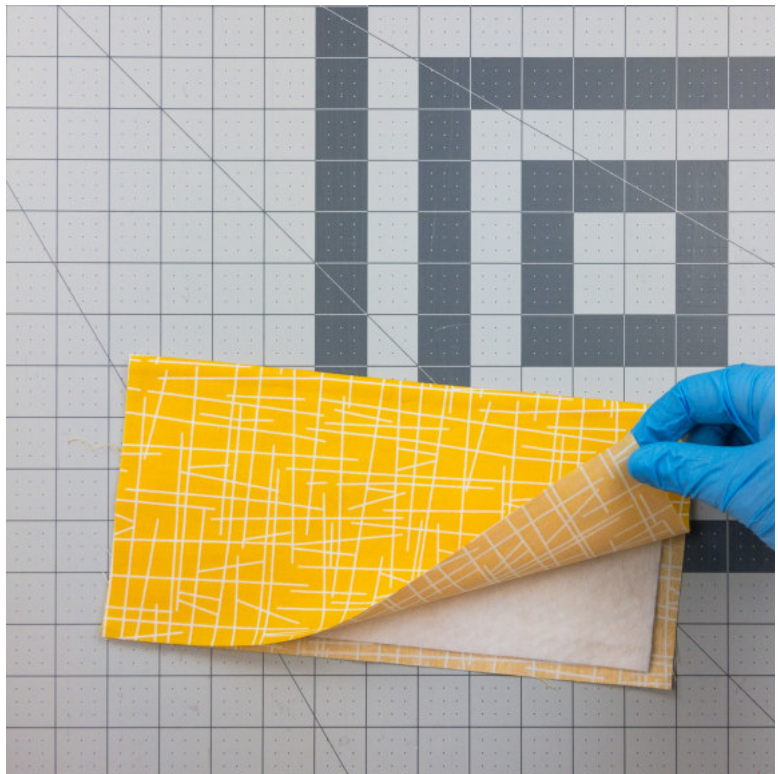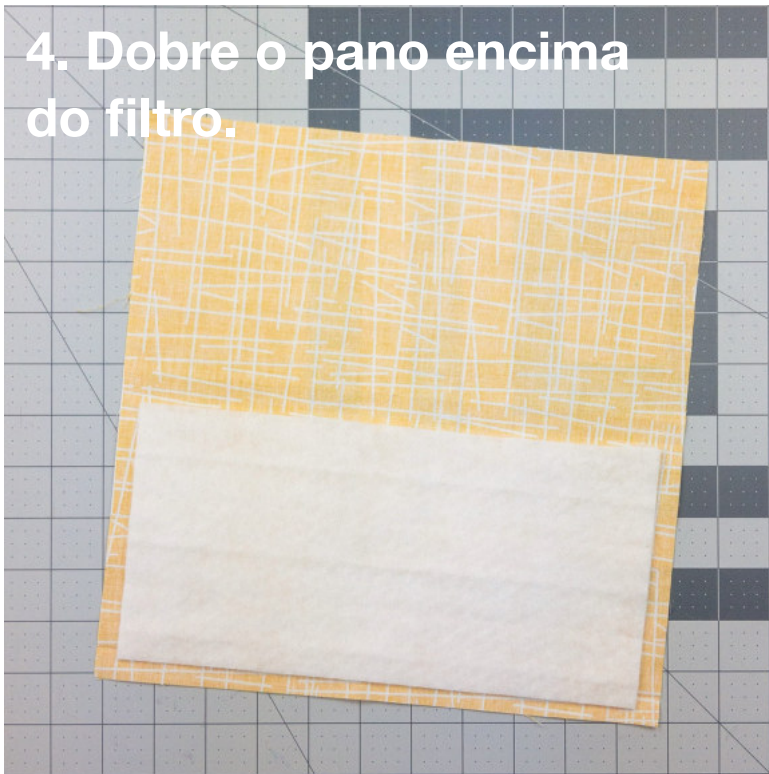


5. Costure em 3 lados.


~3/16" (0.5cm) de distância para a costura, rápido > bonito.




6. Dobre.

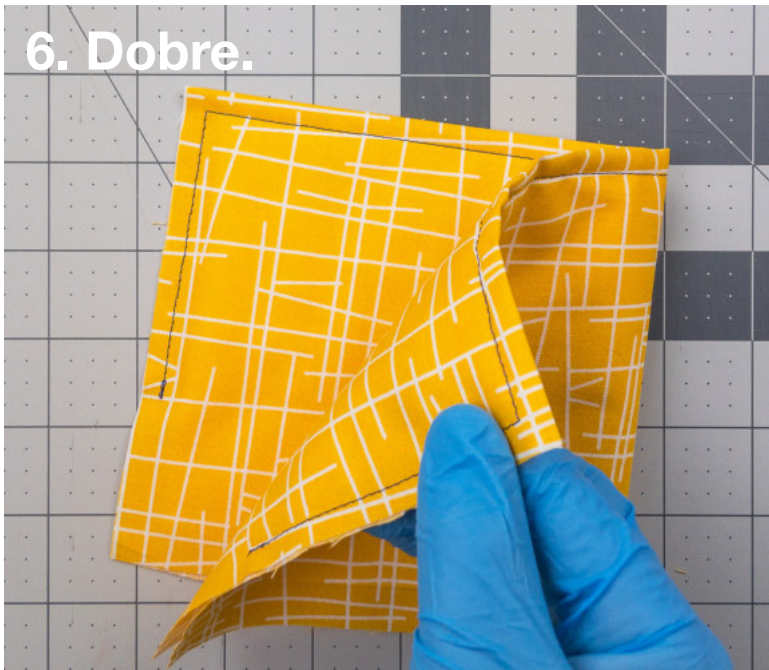

7. Marque.

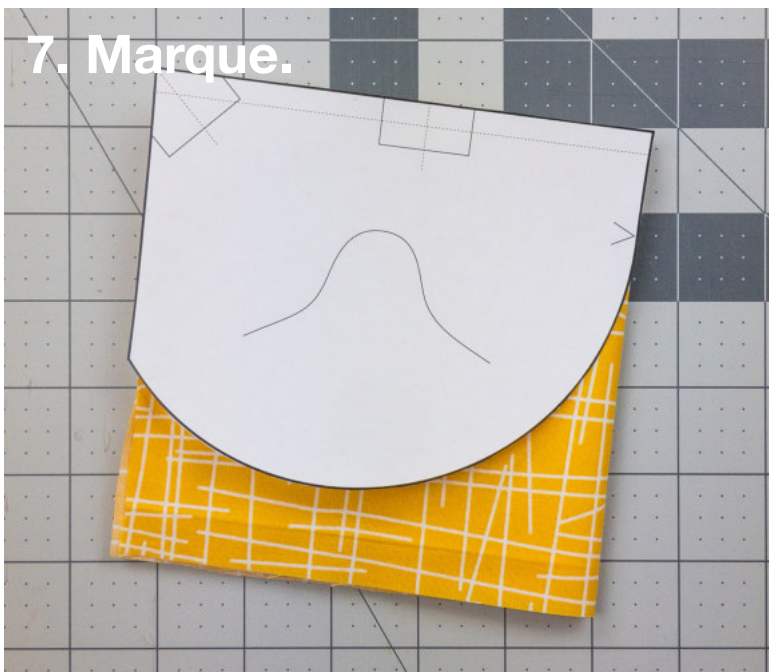

Use o molde da página 1.

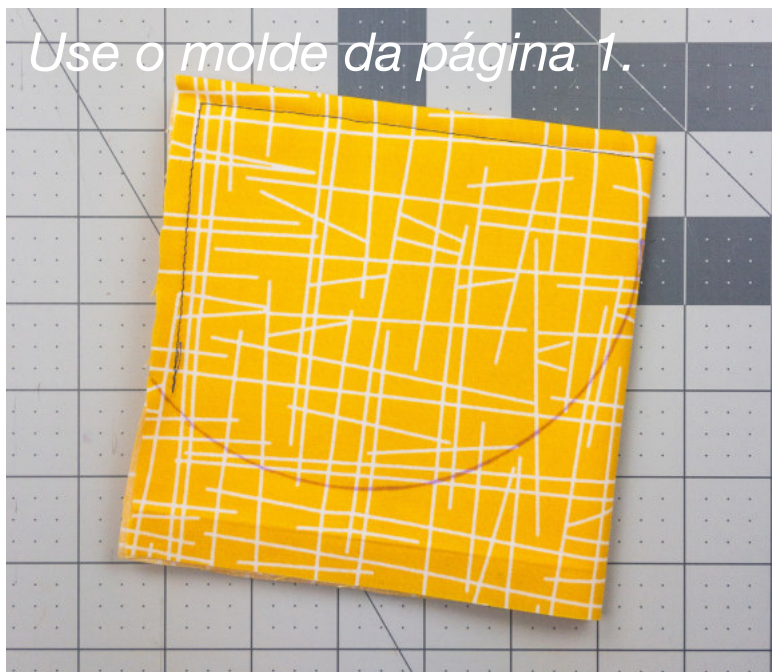

8. Costure.




9. Corte.



10. Dobre de adentro para fora.



11. Marque a ubiquação das fitas.

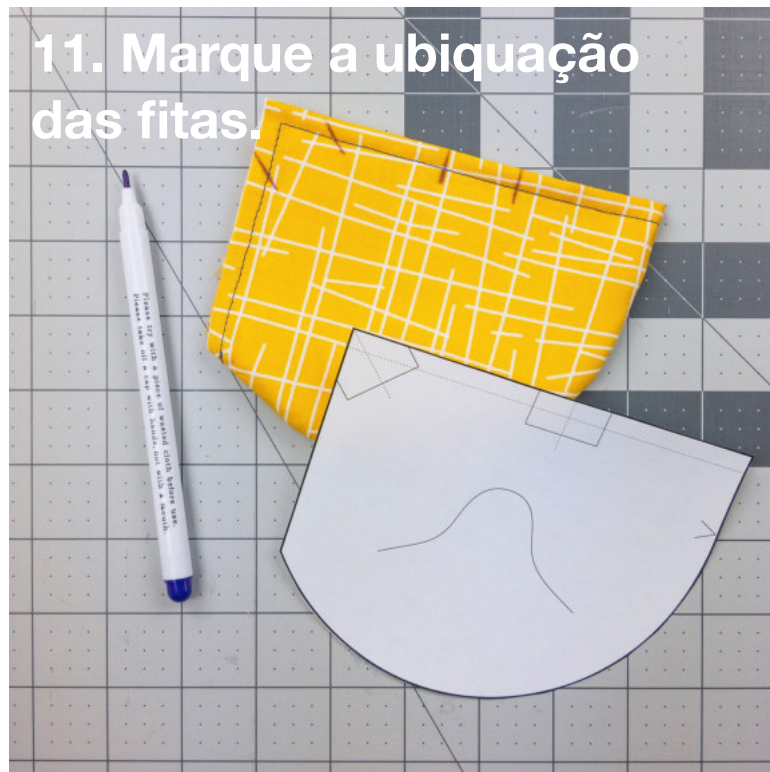


12. Costure as fitas no lado exterior da mascara.

Veja a ultima página para uma maneira mais rápida para instalar as presilhas.





13. Inserte o fio para que fique no centro encima do nariz.

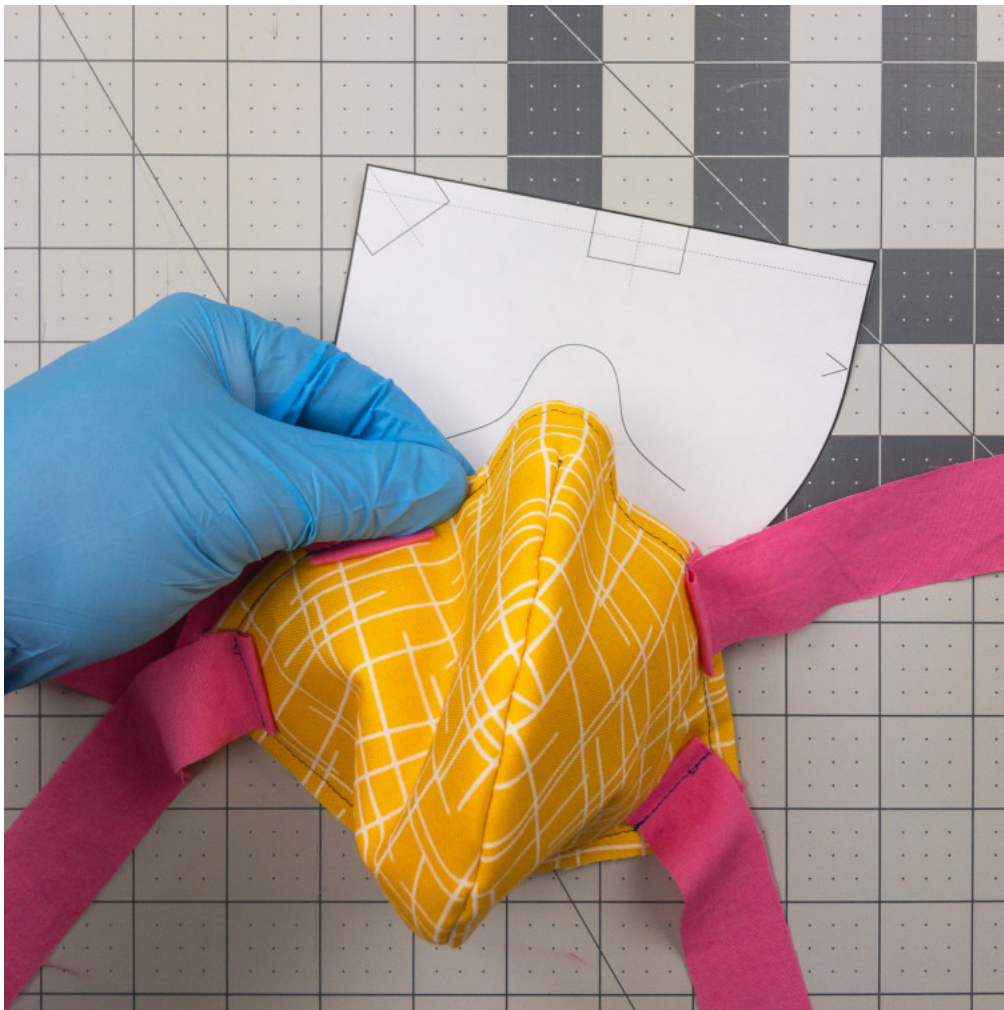

14. Dobre o fio para que tome forma aproximada de nariz.

Use a mascara

ragmask.com




Uso e detalhes de cuidado serão comunicados...

Dica: Fitas Rápidas

Mais em ragmask.com/pro

1. Imprime outra copia da página 1, corte o molde. Depois de fazer a primeira dobrada, marque o centro das fitas.

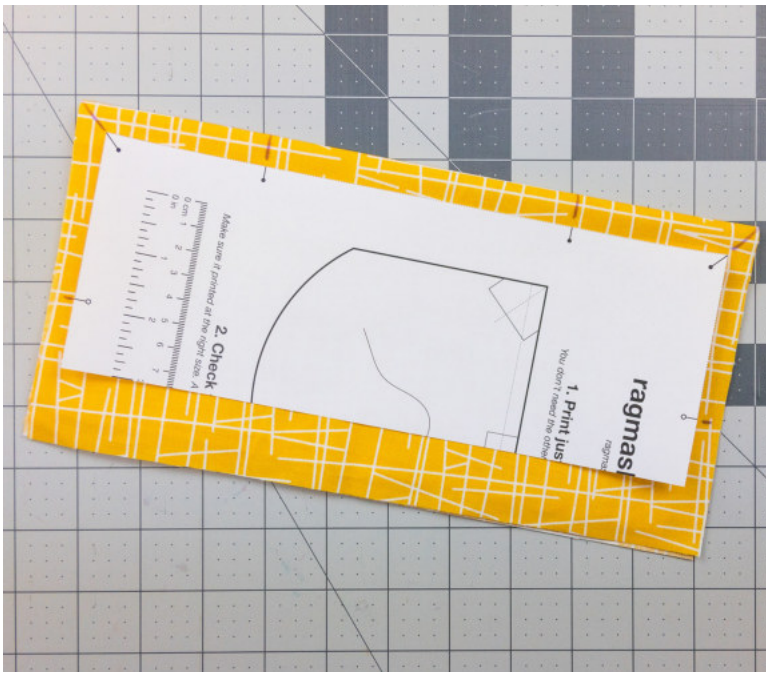

2. Costure as fitas como parte da primeira costura. (Pesponte encima das fitas para aumentar a durabilidade).



3. Dobre no meio (com as fitas adentro da dobrada), marque, costure e corte como antes.

